



Vista 系統更新 oceanview 驅動程式 步驟


將電腦連接光譜儀設備，開啟裝置管理員，會看到 ocean optics USB Devices 下面，有連接的光譜儀，畫面下方連接 Ocean optics QE-PRO(WinUSB)

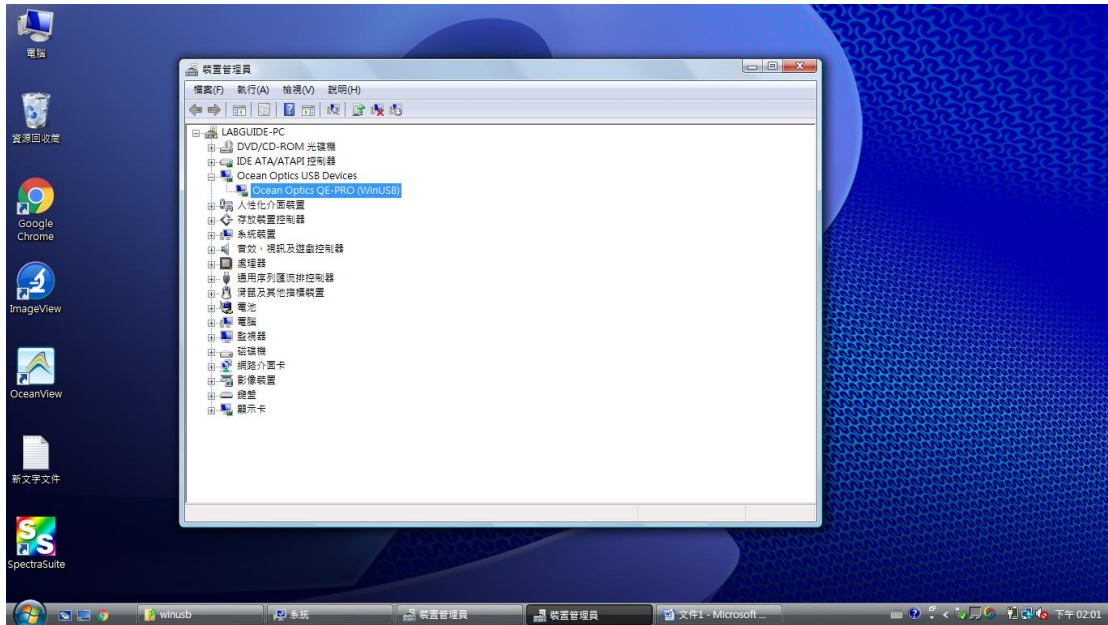


在 Ocean optics QE-PRO(WinUSB)案右鍵，更新驅動程式軟體

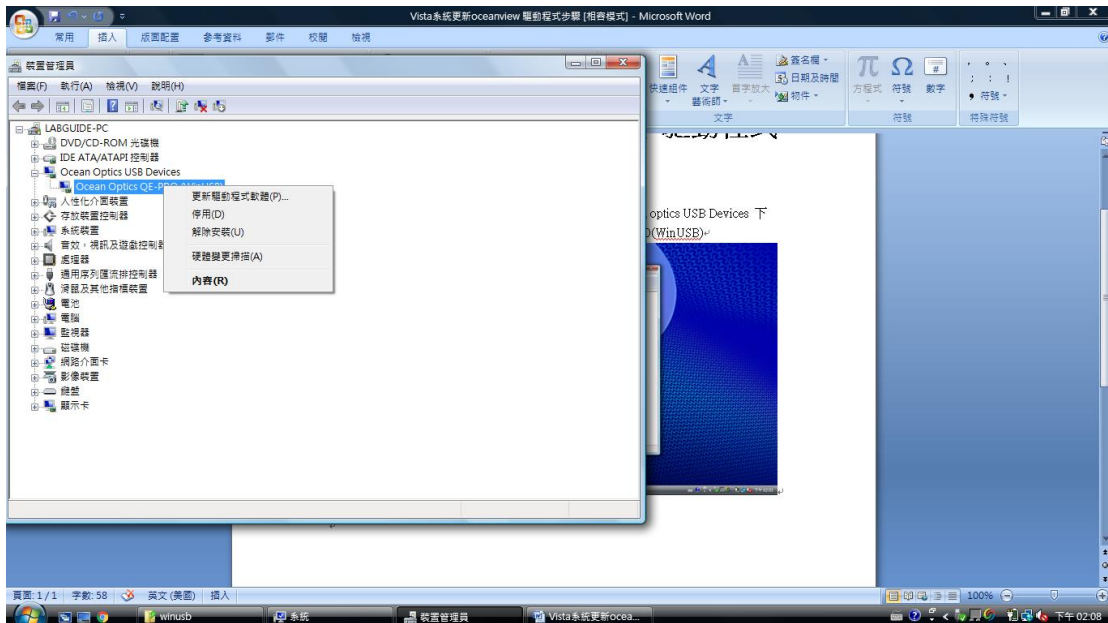


選擇瀏覽電腦上的驅動程式軟體

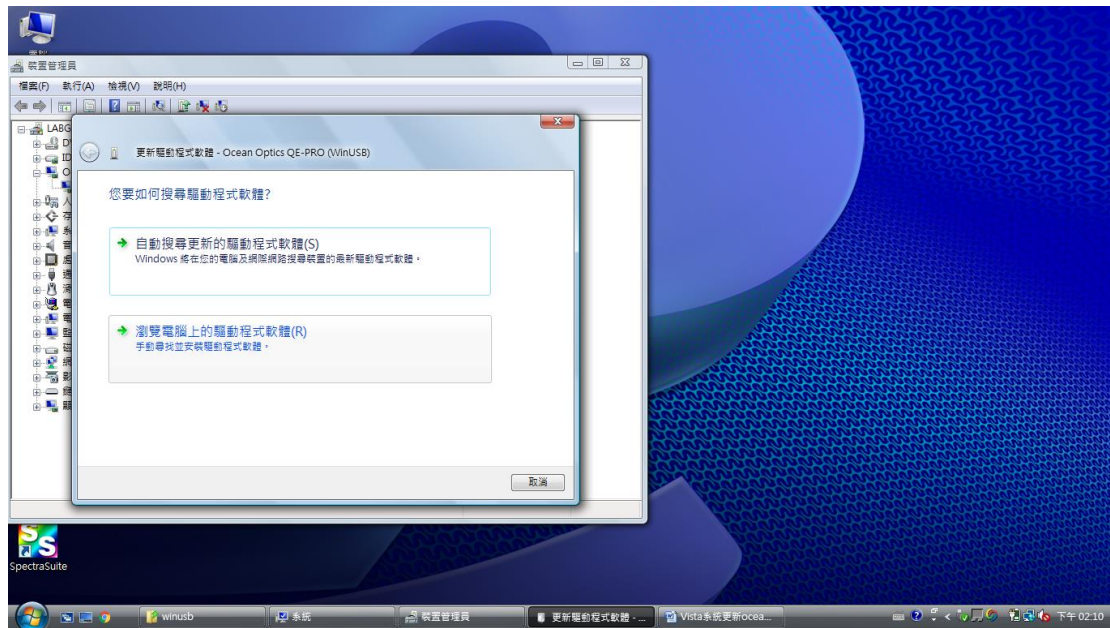

選下方讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選

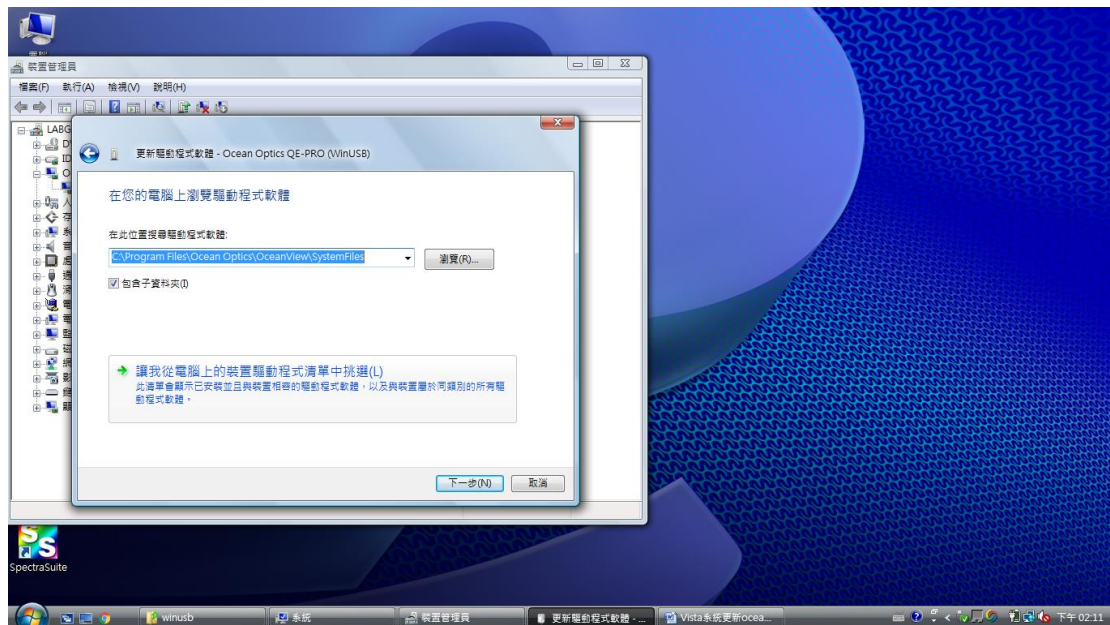


選擇從磁片安裝

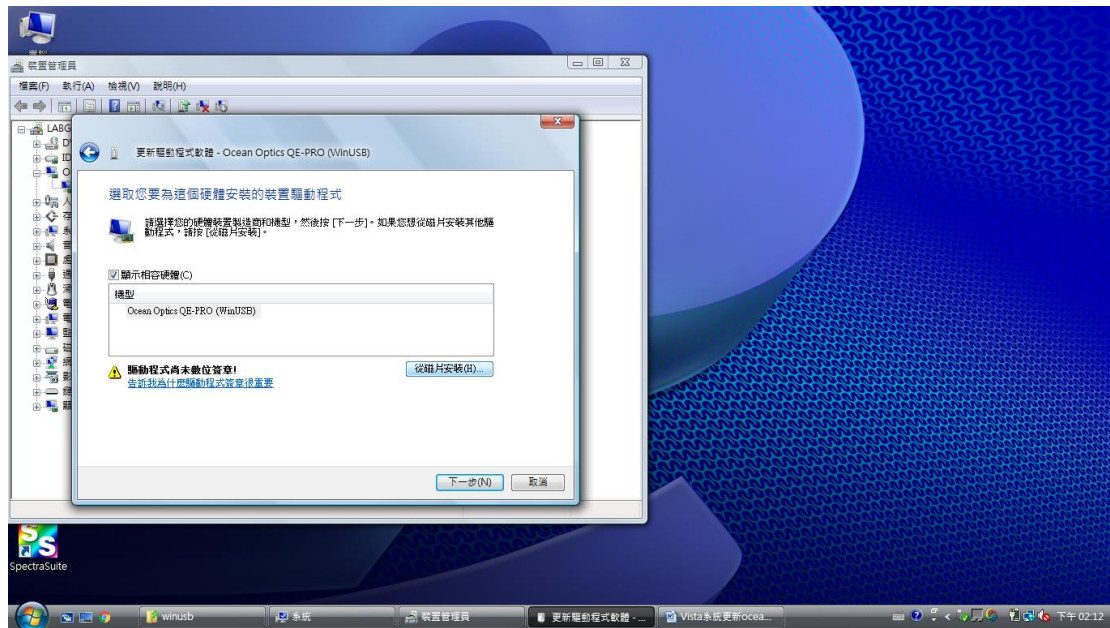

瀏覽

尋找入境 C://program files/ocean optics/oceanview/system 資料夾內找尋
OOI_QEPRO.inf 檔案後按下一步

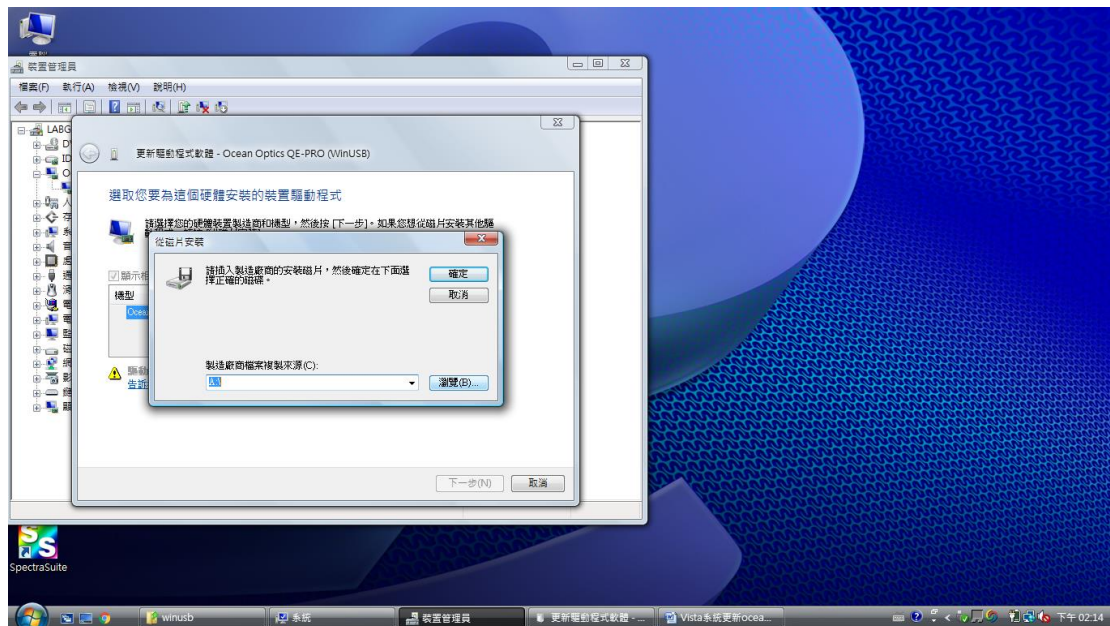

成功更新驅動程式軟體

